


新製品

# Visualizer

## ビジュアライザー FS-V

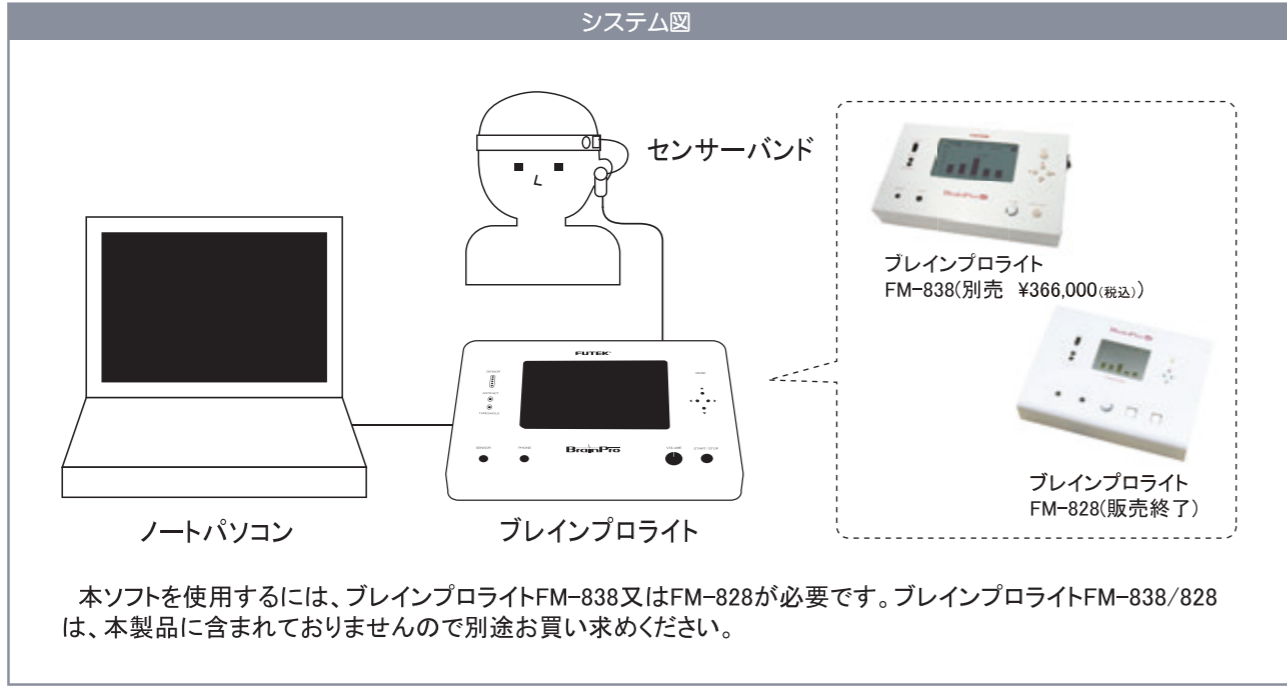

ブレインプロ・オプションシリーズ

バッテリープロ (BAT-PRO)

電源ノイズを軽減。屋外でも脳波測定可能なバッテリーセット。  
ブレインプロFM-939/929/838/828専用。  
¥55,000(税込)

ディスポプロ (DIS-PRO)

被験者ごとに交換できる使い捨てセンサーです。  
ブレインプロFM-939/929/838/828専用。  
¥22,000(税込)  
別売リ  
ディスポプロ用電極 30個 ¥9,900(税込)

ブレインプロ・シリーズ

研究用 簡易脳波計 **ブレインプロFM-939**

脳波解析ソフト「アナライザー」付属

脳波を1.0~30.0Hzまで0.5Hz単位でグラフ表示。より詳細な脳波を測定しデータ化します。

¥575,000(税込)

仕様	製品名	ビジュアライザー
	型番	FS-V
	測定時間	1~60分
	グラフ種類	立体棒グラフ、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ
	解析脳波	ベータ波:20.0Hz、アルファ3波:12.5Hz、アルファ2波:10.0Hz、アルファ1波:8.0Hz、シータ波:5.0Hz
	対応機種	ブレインプロライトFM-838、FM-828
動作環境	対応OS	Microsoft Windows7、8、10対応 (32、64ビット版)
	測定データ容量	3分測定データ:約6KB
	DVD-ROMドライブ	インストール時に必要

[製品内容] ビジュアライザー(DVD)、取扱説明書  
 [価格] 103,000円(税込)

◎本ソフトは健常者を対象としたメンタルヘルスや研究目的に開発されたものです。医療目的の臨床脳波計とは使用目的が異なります。

製品に関するお問い合わせ  
 HOME PAGE <http://www.futek.co.jp>  
**フューテック エレクトロニクス株式会社**  
 フリーダイヤル 0120-078-100  
 【受付時間9:00~18:00 土・日・祝日を除く】  
 〒221-0021 横浜市神奈川区子安通1-5-6  
 Tel. 045-453-1007 / Fax. 045-453-1008  
 ●本カタログの記載内容は2021年4月現在のものです。  
 ●仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更する場合があります。


販売店



脳波を指標にリラックス～ストレスを見える化！

脳波測定器ブレインプロライトで検出した脳波測定データを、パソコンで解析し解りやすいグラフと数値で表示します。


専門的な知識が無くても、脳波に反映された意識状態を確認することができます。

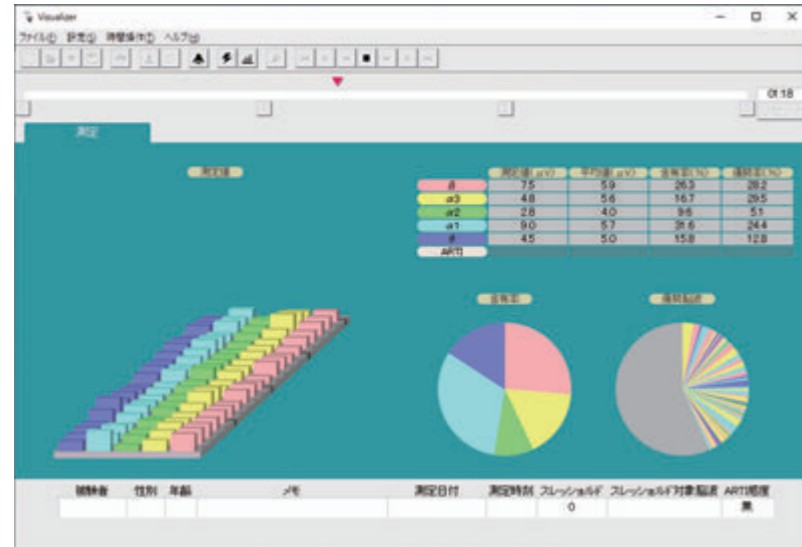

## ■リアルタイムでモニタリング

測定状況をリアルタイムでモニタリングできるので、測定ミスの心配がありません。


ビジュアル的なインパクトの強い立体棒グラフと円グラフで、脳波を色分けして表示します。

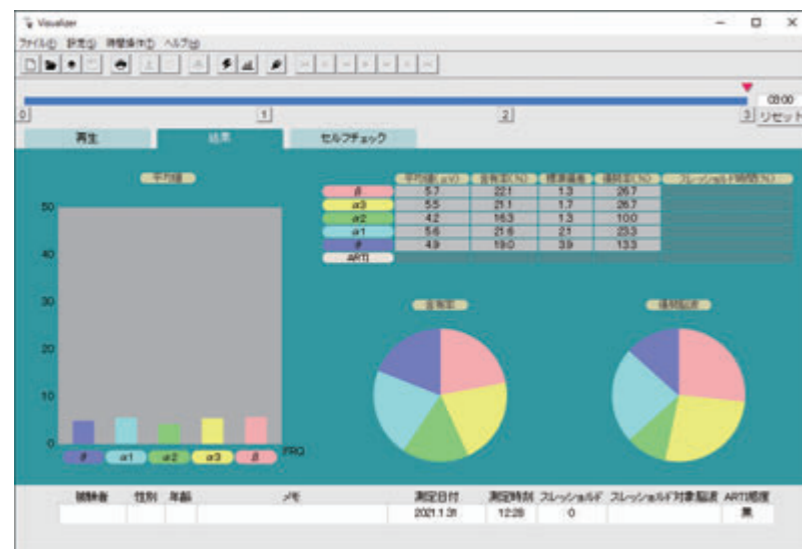

## ■解かりやすい測定結果

測定結果を解りやすい数値とグラフで表示します。

平均値（棒グラフ）、含有率（円グラフ）、優勢率（円グラフ）、標準偏差など様々な角度から脳波を解析し、解りやすいグラフで表示します。

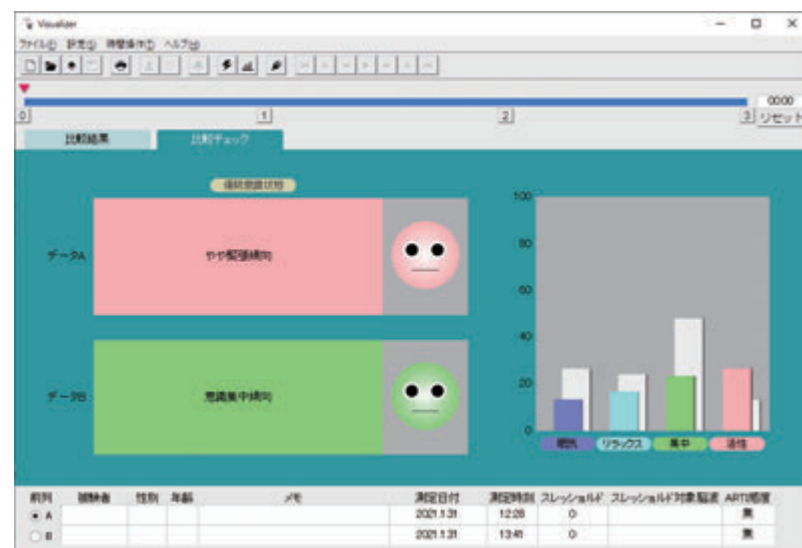


## ■データの比較


ふたつの保存データを並べて比較表示できます。

リラクゼーション等、何らかの介入前後のデータの比較に便利です。

## ■リラックス～ストレスの見える化！セルフチェック画面

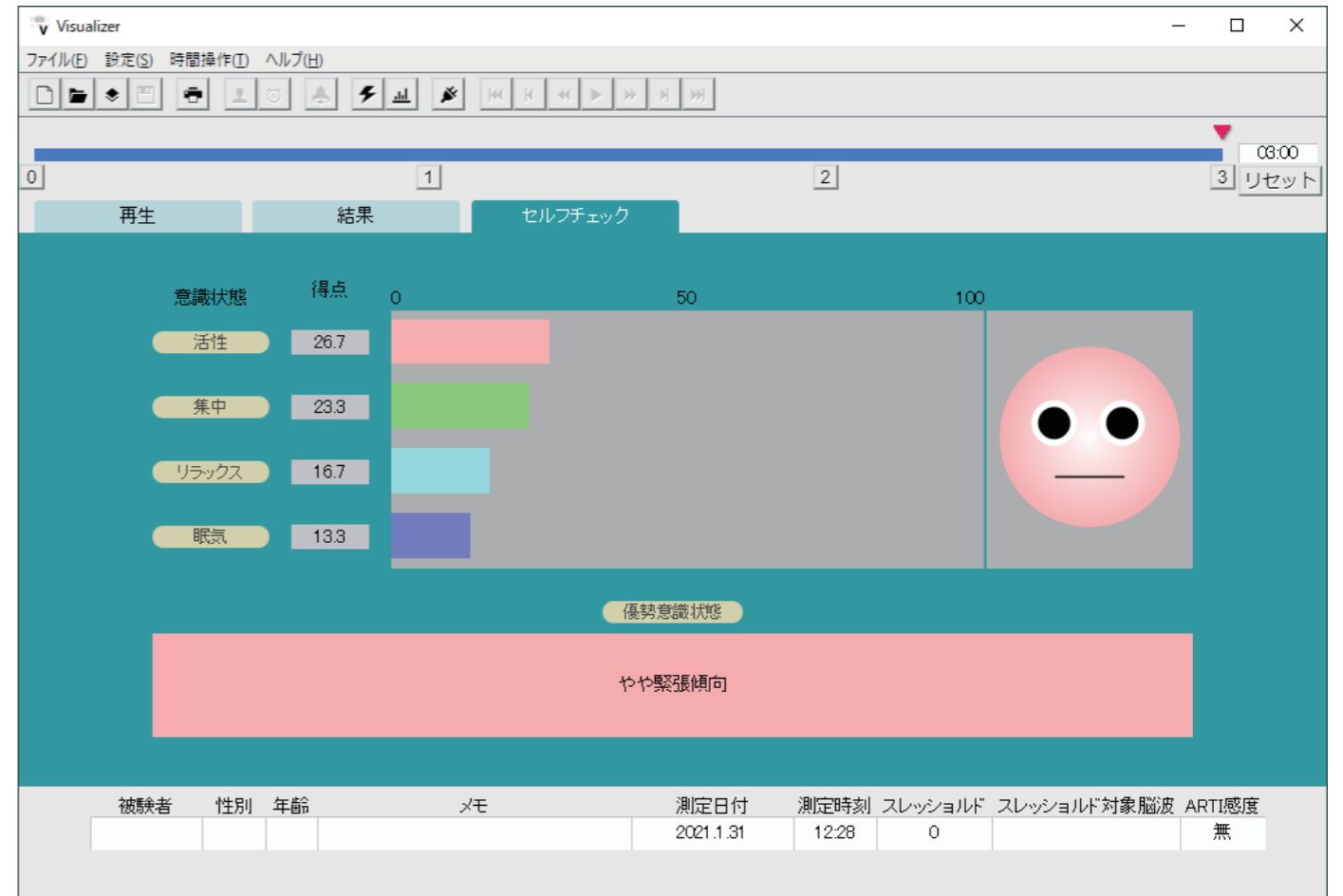

脳波の測定結果から現在の心理状態を点数とコメントで表示します。これにより一目で「リラックスしているのか、緊張しているのか」などの心理状態の変化を確認することができます。リラックス～ストレスの見える化に最適です。

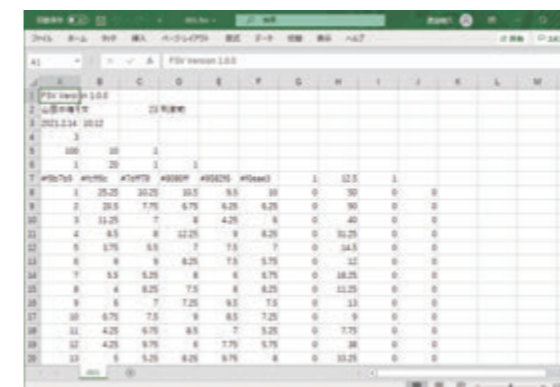

## ■表計算ソフトで処理

汎用性のある、CSV形式でデータ保存されます。既存の表計算ソフト（マイクロソフト社エクセルなど）でデータを扱えるので、表計算ソフトの機能を使用したデータ解析が可能です。